



CESTOS FAMI PARA PROCESSAMENTO




Cestos para Processamento, indicados para limpeza, esterilização, armazenagem e transporte de dispositivos médicos, fabricados em aço inoxidável, marca FAMI.



Utilizados como **embalagens de proteção** em todo o ciclo de processamento nos Centros de Materiais e Esterilização (CME) e empresas de esterilização.

Diferenciais

- Cantos arredondados e acabamento liso que evitam danos às embalagens flexíveis.
- Alças retráteis que facilitam o transporte e a apresentação asséptica.
- Podem ser utilizados em todo o ciclo de processamento, substituindo estojos/caixas perfuradas e cestos amarrados
- Perfurações nas laterais que evitam a saída dos instrumentos, protegendo o sistema de barreira estéril (SBE), e reduzindo o risco ocupacional.
- Perfurações inferiores maiores que facilitam o acesso dos agentes de limpeza e esterilização.
- Podem ser embalados em um SBE flexível (como o SMS) ou utilizado dentro de um SBE rígido (como o contêiner), devido às suas medidas que seguem normas internacionais (DIN).
- Baixo peso e grande área perfurada que diminuem a massa da carga a ser processada, melhorando o desempenho dos equipamentos de limpeza automatizada e esterilização.

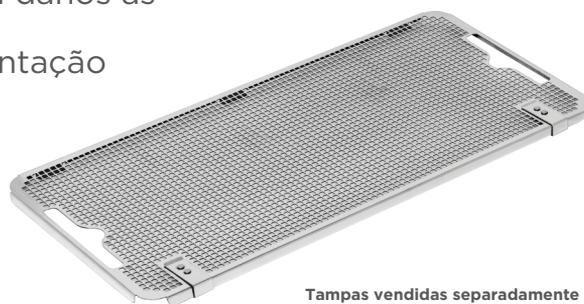

Tampas vendidas separadamente

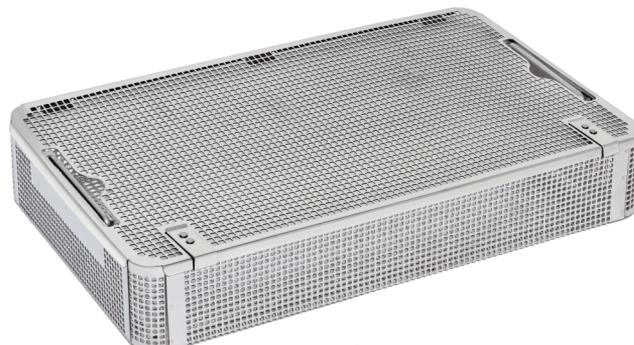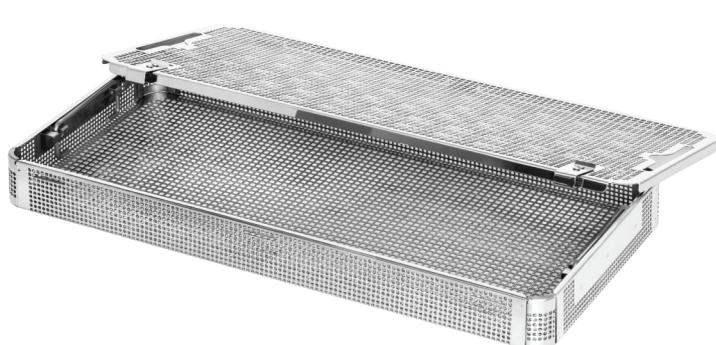

Códigos, dimensões e peso

Cestos para Processamento (Padrão DIN)

Códigos	Dimensões	Peso
662.130	540 x 255 x 30 mm	0,880 kg
662.150	540 x 255 x 50 mm	1,035 kg
662.170	540 x 255 x 70 mm	1,170 kg
662.190	540 x 255 x 100 mm	1,430 kg

Códigos	Dimensões	Peso
662.230	485 x 255 x 30 mm	0,800 kg
662.250	485 x 255 x 50 mm	0,960 kg
662.270	485 x 255 x 70 mm	1,085 kg
662.290	485 x 255 x 100 mm	1,300 kg

Códigos	Dimensões	Peso
662.330	405 x 255 x 30 mm	0,720 kg
662.350	405 x 255 x 50 mm	0,850 kg
662.370	405 x 255 x 70 mm	0,980 kg
662.390	405 x 255 x 100 mm	1,205 kg

Códigos	Dimensões	Peso
662.530	245 x 255 x 30 mm	0,520 kg
662.550	245 x 255 x 50 mm	0,620 kg
662.570	245 x 255 x 70 mm	0,750 kg
662.590	245 x 255 x 100 mm	0,875 kg

Códigos	Dimensões	Peso
662.745*	265 x 120 x 45 mm	0,380 kg
662.845*	265 x 170 x 45 mm	0,510 kg

* não possui tampa

Tampas**

Códigos	Dimensões	Peso
662.110	540 x 255 mm	0,650 kg
662.210	485 x 255 mm	0,600 kg
662.310	405 x 255 mm	0,455 kg
662.510	245 x 255 mm	0,335 kg

**Tampas vendidas separadamente

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2024_REV05_PT