



LAVADORA E DESINFETADORA  
DE COMADRES E RECIPIENTES

# CLINOX 3A

BACTERICIDA • FUNGICIDA • ESPORICIDA



Clinox 3A Auto

Clinox 3A Total

## VANTAGENS

- ✓ Interior, estrutura e painéis laterais fabricados em 100% de aço inox **AISI 304** de alta qualidade
- ✓ **Desinfecção térmica** através da manutenção da temperatura de 85° a 90°C por 1 minuto, atendendo a ISO 15883-3
- ✓ **Descarga de resíduos automática embutida**, sem risco de respingos, e **autolimpeza** da cuba através de 12 jatos de água
- ✓ Oferece **segurança e melhores condições de trabalho** aos profissionais da saúde
- ✓ **Sustentável**, apresenta eficiência nos processos de limpeza e desinfecção térmica, através de ciclos de 5 a 7 minutos (5' ciclo normal, 6' ciclo intensivo e 7' ciclo esporicida) com **baixo consumo de água e detergente**



Suporte para comadres e papagaios opcional

Modelos	AUTO			TOTAL
	100% automática			
Abertura / Fechamento	Automática, por pedais. Sem contato manual			
Operação	Sistema automático de fechamento, rotação da comadre, início do ciclo e abertura			
Tela	Colorida de 7 polegadas. Reconhecimento de gestos 3D para o jato de água para limpeza da cuba			
Conexões	Plug Rj45 / WiFi opcional			
Ciclo	Normal e intensivo			ESPORICIDA
Consumo de água fria	Ciclo Normal	Ciclo Intensivo	Efeito «Descarga»	Ciclo Esporicida
	8 litros	8 litros	20 litros/min	8 litros
Consumo de água quente	10 litros	18 litros	-	18 litros
Detergente	15 ml	15 ml	-	25 ml
Tempo do Ciclo	5 min	6 min	-	7 min
Consumo Elétrico	0,161 kW/h	0,165 kW/h	-	0,165 kW/h
Nível de detergente	Indicação visual e alarme sonoro			

## Recipientes



Papagaio



Comadre



Cuba Rim



Cuba Assepsia



Jarra



Balde

## Prateleiras



## Acessórios Individuais



Suporte de Parede para Comadre



Suporte de Parede para Comadre e Papagaio



Suporte de Parede para Frascos



Suporte de Parede para Papagaio



Suporte de Parede para 1 frasco



Suporte de Parede para Comadre, Papagaio e Frasco

## Combinações

A lavadora Clinox 3A é uma evolução que permite não só a limpeza e desinfecção térmica de comadres e papagaios, mas também, de uma ampla variedade de recipientes e utensílios. A cuba superior oferece grande capacidade para acomodar papagaios, frascos, vidros graduados, cubas rins, baldes, entre outros.



Suporte para Papagaios




Suporte para Balde



Suporte para Comadre



Cesto para Vidros Graduados

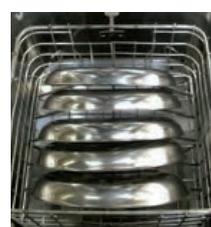

Suporte para Cubas Rim



Suporte para Comadre

## SANEANTE TESTADO E VALIDADO

### SECBRIL - Detergente, descalcificante, secante e brilhantador

Contém na sua formulação tensoativos não iônicos, ácidos orgânicos suaves e complexantes que atuam como agentes de limpeza **removendo a matéria orgânica ressecada ou incrustada nos utensílios**. Protege a lavadora desinfetadora contra calcificação.



ÚNICO detergente **TESTADO E VALIDADO** para utilização na Lavadora Desinfetadora de Comadres e Recipientes (CLINOX 3A).

