



ENDOCLEAN™ - ESCOVA DE LIMPEZA PARA ENDOSCÓPIO



Projetada para a limpeza manual de endoscópios e outros instrumentos médicos que possuam canais internos.

Diferentemente das escovas convencionais, a **EndoClean** substitui as cerdas por raspadores flexíveis de uso único.

Os raspadores são fabricados com um material polimérico macio que se adapta ao formato interno do canal, proporcionando uma **limpeza eficaz e delicada**, sem danificar a superfície interna do equipamento.

Seus raspadores de plásticos macio se adaptam ao formato do canal **garantindo uma vedação** circunferencial que **aumenta a eficácia da remoção de resíduos** internos.

Os raspadores de 360 graus da escova EndoClean proporcionam uma vedação circunferencial completa no canal do endoscópio, removendo quase toda a sujeira em uma única passada. Quando o endoscópio está submerso em detergente, a vedação de 360 graus cria um fluxo antes e depois no canal, preenchendo-o com detergente, o que aumenta o tempo de contato do produto químico e melhora a eficácia do processo de escovação manual.


Diferenciais Técnicos e de Rastreabilidade

- Projetada para limpar em uma única passada. (Escove até que o endoscópio esteja limpo);
- Uso único;
- Fabricada em conformidade com a ISO 13485 - Sistema de Gestão de Qualidade para Dispositivos Médicos;
- Diminui o esforço repetitivo acelerando o processo de limpeza;
- Raspadores 360°;
- Unitário ou a granel;
- Embalados individualmente ou em suporte na parede, tipo cassete;
- Raspadores que criam fluxo antes e depois no canal.

Cassete para escovas
com suporte de parede



Refil para cassetes

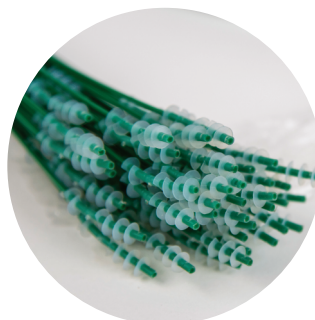

Códigos, dimensões e peso

EndoClean™

Códigos	Dimensões	Peso	Especificações
EC2448/60C	Ø2,4 - 4,8 mm e 2200 mm de comprimento	2,09 Kg	Cassete com 60 escovas
EC2448/180R	Ø2,4 - 4,8 mm e 2200 mm de comprimento	1,19 Kg	Refil para cassete - Pacote com 180 escovas
EC2448/240R	Ø2,4 - 4,8 mm e 2200 mm de comprimento	1,52 Kg	Refil para cassete - Pacote com 240 escovas
EC2448/1SP	Ø2,4 - 4,8 mm e 2200 mm de comprimento	0,845 Kg	Caixa com 60 pacotes com 1 escova + 1 escova de porta em cada
EC2448/1SN	Ø2,4 - 4,8 mm e 2200 mm de comprimento	0,722 Kg	Caixa com 60 pacotes com 1 escova em cada
EC1726/60C	Ø1,7 - 2,6 mm e 2200 mm de comprimento	1,863 Kg	Cassete com 60 escovas
EC1726/180R	Ø1,7 - 2,6 mm e 2200 mm de comprimento	0,469 Kg	Pacote com 180 escovas
EC1726/240R	Ø1,7 - 2,6 mm e 2200 mm de comprimento	0,551 Kg	Pacote com 240 escovas
EC1726/1SP	Ø1,7 - 2,6 mm e 2200 mm de comprimento	0,404 Kg	Caixa com 60 pacotes com 1 escova + 1 escova de porta em cada
EC1726/1SN	Ø1,7 - 2,6 mm e 2200 mm de comprimento	1,38 Kg	Caixa com 60 pacotes com 1 escova em cada
EC/NC	Cassete Vazio com suporte para parede	1,84 Kg	1 unidade
26027-10	Escova de Porta 156 mm	0,1 Kg	Pacote com 10 unidades

+55 11 3775 0300 ✉ info@fami.com.br

🏠 www.fami.com.br

📱 /famitecmed



2025_REV00_PT